



**BETINATEXTEIS LAR**  
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA.  
Leiria, Portugal  
www.betinatexteis.com

## Ficha Técnica de Produto Product Technical Specification

**Nome do Produto:** Semi-máscara Filtrante FFP2 NR

**REF:** BTHM

**Data última revisão:** 10/12/2021

**Revisão nº** 00

**Product's name:** Filtering Half Mask FFP2 NR

**Revision date:**

**Revision nr.:**

### Descrição / Description

Máscara descartável para proteção do rosto com prega vertical, conferindo-lhe uma estrutura 3 D para maior conforto. Com 6 camadas de proteção e fixação nas orelhas através de elástico. Clip nasal integrado na parte interior para melhor ajuste ao rosto do utilizador. Não estéril.



Disposable face mask with a 3D structure, thanks to the vertical pleat, giving it more comfort. With six layers of protection it comes with elastic ears strings. It has a nose clip on the inside to better fit the wearer's face. Not sterile.



### Características / Specifications

**Matéria-Prima:** Non-woven fabric branco 80g (1 camada TNT 50g e outra 30g), Meltblown 98-99% BFE 50g(3 camadas 25g), Hot Air Cotton 35g camada), elástico para as orelhas (5mm), arame nasal em plástico (5mm)

**Raw Material:** White Non-woven fabric 80g (1 TNT layer 50g and another 30g), Meltblown 98-99% BFE 50g (2 layers 25g), Hot Air Cotton 35g (1 layer), Elastic for the ears (5mm), Plastic nasal wire (5mm)

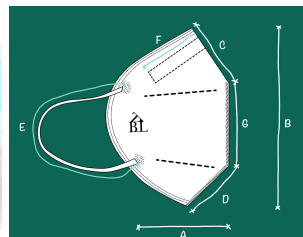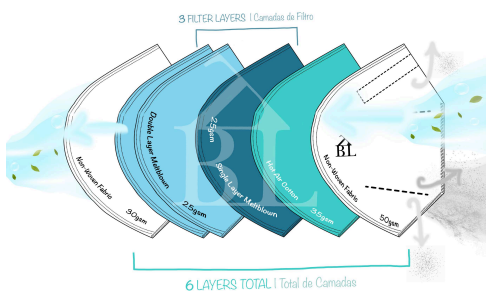

PARAMETERS		SIZES (mm)
A	LENGTH	105
B	TOTAL HEIGHT	160
C	LENGTH TOP	55
D	LENGTH BOTTOM	65
E	ELASTIC LENGTH	170
F	NASAL CLIP LENGTH	95
G	HEIGHT OF PLEAT	70

**Conservação:** Armazene as máscaras longe da luz solar direta, longe de produtos químicos e em ambiente seco.

**Conservation:** Store masks out of direct sunlight, away from chemicals and in a dry atmosphere.

**Uso Pretendido:** Máscaras alternativas para contactos frequentes com o público, de uso único

**Intended Use:** Alternative masks for frequent contact with the public, for single use

### Especificações Embalagem / Packaging Specifications

**Embalagem Primária:** Caixa de cartão (50pcs)  
**Primary package:** Paper Box (50pcs)

**Embalagem Secundária:** Saco plástico (por unidade)  
**Secondary package:** Plastic Bag (per unit)

### Instruções de uso / Use Instructions

Antes de utilizar a máscara, lave as mãos e certifique-se que esta não está danificada.

Before use you should wash your hands and make sure the mask is not damage.



1. Segure a máscara com o arame nasal para cima e as letras para o exterior.
2. Coloque a máscara tapando o nariz e a boca totalmente.
3. Prenda os elásticos nas orelhas.
4. Pressione o arame nasal e ajuste ao seu rosto.
5. Cubra a máscara com as mãos e respire rapidamente para verificar se não há saídas de ar pelas laterais. Se necessário reajustar.

1. Hold the mask with the nose strip up and the FFP2 mark facing outside.
2. Put the mask over your nose and mouth and make sure you cover them fully.
3. Secure the ear strings and adjust for fit comfortably..
4. Press the nose strip for perfect fitting to your face.
5. Cover the mask with both hands without pinching the shape and inhale and exhale. If you feel air blowing from the edges readjust it.

#### Outras Características do Produto / Other Product Specifications

EPI de Categoria III fabricado de acordo com o Regulamento (UE) 2016/425, mais precisamente com a norma harmonizada EN 149: 2001 + A1: 2009. Dispositivos de proteção respiratória ou Semi-máscara filtrante para proteção contra partículas. Requisitos, testes e marcação de acordo com o Certificado nº21/4743/00/0161 pela AITEX (NB 0161).

Category III PPE manufactured in accordance with Regulation (EU) 2016/425, more specifically with the norm EN 149: 2001 + A1: 2009. Respiratory protection device or Filtering half mask to protect against particles. Requirements, tests, marking, in accordance with Certificate nr. 21/4743/00/0161 by AITEX (NB 0161).



#### Fabricante / Manufacturer

**BETINATEXTEIS LAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA.**

*POLO II - dispositivos médicos*

R. Bernardo Oliveira Guardalina, nº9, 2415-400 Leiria, Portugal

**Telefone:** +351 244 882 109 **E-mail:** bll.medicaldv@gmail.com **Website:** <https://www.betinatexteis.com/>

#### Responsável Técnico / Technical Director

*Ruben Filipe Gomes Gonçalves*